



ottobock.

Zenit R

Pure Effizienz

Quality for life

„Meine Lust, Neues zu entdecken, gepaart mit sportlicher Leidenschaft haben mich schon bis ans andere Ende der Welt gebracht. Da freut es mich, wenn ich auch Newcomer ins Boot holen kann, um sie fürs Segeln zu begeistern. An Land unterstützt mich der leichte Zenit R in meinem Freiheitsdrang und gibt mir die Flexibilität, die ich in meinem aktiven Alltag brauche.“

Lasse

In seinem Einmannkielboot segelte er bereits bei Europa- und Weltmeisterschaften mit und war Teilnehmer der Paralympics 2016 in Rio.









„Die direkte Übersetzung von Wind in Geschwindigkeit fasziniert mich beim Segeln. Diese Effizienz der Kraftübertragung schätze ich auch an meinem Zenit R CLT: Seine fest verschweißten Komponenten bieten mir ein Höchstmaß an Stabilität und Fahrdynamik.“





Frei sein und Kurs halten



Lasse, Segler

Die genetische Erkrankung HMSN beeinflusst die Motorik und Sensorik seiner Beine, und dennoch ist das Segeln von klein auf Hauptbestandteil seines Lebens. Als Junge begann der Berliner seine Karriere auf dem Wasser klassisch im Optimisten und schaffte es 2016 mit seinem Team bis auf Platz 6 der Paralympics. Im Sport sucht Lasse den Kampf mit den Elementen. Im Alltag verlässt er sich auf die hervorragenden Eigenschaften seines Zenit R. Als Maschinenbaustudent begeistern ihn die präzise Konstruktion, das funktionale Design und die robuste Verarbeitung seines Starrrahmenrollstuhls.

Alles griffbereit

„Die gut erreichbare Rückentasche mit praktischem Magnetverschluss ist für mich ein perfekter Stauraum für unverzichtbare Kleinigkeiten.“

Mehr Dynamik dank fest verschweißter Komponenten: Zenit R CLT

Wenn jeder deiner Kraftimpulse kompromisslos in Bewegung umgesetzt wird, du eins mit deinem Rollstuhl und der Straße wirst, dann ist es ein CLT.



Leicht und kraftvoll nach vorn

Die feste Verschweißung der Antriebsradanbindung und des Rückenrohres machen den Zenit R CLT extrem belastbar und sorgt für eine hohe Effizienz bei der Kraftübertragung. Eine aktive oder passive Feinjustierung des Schwerpunktes um +/- 12 mm ist über Drehen des Antriebsradadapters möglich. Mit einer ultraleichten Sitz- und Rückenbespannung oder Seitenteilen aus Carbon kannst du das Gewicht deines Aktivrollstuhls optional noch einmal reduzieren.

Fahren wie auf Schienen

Ein optisches Highlight des Zenit R CLT ist die fest verschweißte Vorderradanbindung. Sie verleiht deinem Stuhl hohe Stabilität und Spurtreue. Gleichzeitig schützt ihr einzigartiges Design die Aufhängung der Lenkradgabel vor Beschädigung bei Kollisionen.



Funktionales Design

Der schnörkellose Fußbügel unterstreicht die offene Rahmenkonstruktion. Du kannst zwischen einer fest verschweißten oder flexibel einstellbaren Unterschenkellänge wählen.

Ilaria kennt keine Barrieren, keine Limits. „Es geht mir darum, eigene Grenzen zu entdecken und neu zu definieren. Mit Training und Ausdauer lernte ich Dinge zu tun, die mit dem Rollstuhl unmöglich schienen. Ich probiere gern Neues aus und möchte mich jetzt auch mal aufs Wasser wagen.“



Auf Details kommt es an

Nicht nur cooles Design ist Ilaria wichtig, auch Stabilität. Deshalb hat sie sich für die robuste Aluminium-Variante des Zenit R entschieden. Die gewichtsoptimierten Komponenten und seine verbesserten Starrrahmeneigenschaften ermöglichen ihr die Fortbewegung mit optimalem Krafteinsatz.





Den Horizont erweitern

Ilaria, Rollstuhlskaterin

Die quirlige, abenteuerlustige Italienerin studiert Sprachen und verbringt trotz angeborener Zerebralparese jede freie Minute in der Halfpipe. Dieser actionreiche Sport gibt ihr, neben vielen Reisen innerhalb der internationalen Community, jede Minute das Gefühl, lebendig zu sein. „Mit einem Segel-Schnuppertag meinen Aktionsradius aufs Wasser zu erweitern, ist daher quasi zwangsläufig.“

„Mein verlässlicher ‚Best Buddy‘ im Alltag ist der auf meine Bedürfnisse angepasste Zenit R. Die ausgewählten Komponenten und die hohe Effizienz der Kraftübertragung geben mir, trotz sportlicher Fahrweise, mehr Ausdauer.“



Robust und variabel: Zenit R Aluminium

Viele Einstellmöglichkeiten erlauben eine individuelle Anpassung für noch mehr Komfort.

Laufruhige, patentierte Vorderradanbindung

Die patentierte Einstellung des Nachlaufes mittels Einstellrad aus Edelstahl sorgt für eine einfache, beidseitige Feinjustierung der Vorderräder. Auf dem Positionsring angebrachte Markierungen ermöglichen die synchrone Einstellung auf einen Blick. Gleichzeitig sichert diese Anbindung einen exakten Geradeauslauf sowie ein leichtgängiges Abrollen der Vorderräder.





Fußbrett, verstellbare Unterschenkelänge

Durch Verstellen der Lenkradposition kann die vordere Sitzhöhe nachträglich auf deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Das fest verschraubte Fußbrett gibt zusätzliche Stabilität, lässt sich jedoch für noch mehr Komfort im Winkel verstellen.



Millimetergenaue Schwerpunkteinstellung

Der einstellbare Antriebsradadapter erlaubt die aktive oder passive Feinjustierung des Schwerpunktes sowie die Einstellung der Sitzhöhe.



Abklappbarer Rücken, anpassbare Rückenbespannung

Ein in die Rückenbespannung integrierter Auslösemechanismus ermöglicht das Abklappen des Rückens mit einer Hand. Da der Rücken in dieser Position auch fest verriegelt, hast du deinen Rollstuhl beim Verladen stets im Griff.

Für noch mehr Komfort ist der Rückenwinkel zusätzlich auch nachträglich individuell einstellbar und die Rückenbespannung kann angepasst werden.

Verschiedene Ausführungen an Schiebegriffen erhöhen die Flexibilität.

Stilvoll auf Fahrt

Sandra, Lehrerin

„Life is what you make it – Leben ist das, was du draus machst“ ist das Motto, der charmanten, zierlichen Wienerin, die seit frühester Kindheit durch eine Virusinfektion gelähmt ist. Neben der Schultätigkeit gilt ihre große Leidenschaft dem Rollstuhltanz im Verein. Dieser verbindet Sportlichkeit mit Eleganz. „Ich umgebe mich gern mit schönen Dingen. Ein stilvolles Leben mit hochwertigen Materialien in bester Verarbeitung sowie individuell auf mich abgestimmte Optionen sind mir wichtig.“ Genau deshalb fährt Sandra einen Zenit R Carbon mit Style-Paket.

Die besondere Ästhetik und Leichtigkeit beim Segeln, das Zusammenspiel von Wind und Wellen faszinieren Sandra. „Ich finde es deshalb interessant, durch einen Profi wie Lasse Einblicke in diesen schönen Sport zu bekommen.“





„Als Lehrende bin ich neugierig und aufgeschlossen. Es ist mir wichtig, alles zu tun, was interessant erscheint, und ich zögere nicht, neue Dinge auszuprobieren. Da ich deshalb in meiner Freizeit in vielen Bereichen sehr aktiv bin, muss mein Rollstuhl vor allem leicht, aber auch besonders stabil sein.“



Akzente setzen

„Das Style-Paket mit farbigen Elementen an meinem Zenit R Carbon unterstreicht meinen persönlichen Stil.“

Stylisches Statement: Zenit R Carbon

Klare Linienführung, funktionales Design und optionale Individualisierung verleihen persönlichen Stil.



Baxx Rücken

Die ergonomisch geformten Rückenschalen stabilisieren speziell den seitlichen und hinteren Bereich des Oberkörpers und sorgen für ein angenehmes Sitzgefühl. Du kannst deinen Baxx aus 20 unterschiedlichen Farben auswählen.



OutFront-Scherenbremse

Ob sportliche OutFront-Scherenbremse oder ergonomische Kniehebelbremse – Du entscheidest.



Einfaches Handling beim Verladen

Sein geringes Gewicht und seine kompakte Bauweise ermöglichen bequemes Ein- und Ausladen im Handumdrehen.

Dabei sorgt das oval gestaltete Achsrohr für ein gutes Griffmoment bei geringem Kraftaufwand.




Der Zenit R auf einen Blick

Technische Daten	Alu / Carbon	CLT
Gesamtlänge	640 – 1.040 mm	640 – 1.040 mm
Gesamtbreite	495 – 710 mm	495 – 710 mm
Gesamthöhe	620 – 1.050 mm	620 – 1.050 mm
Sitzbreite	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Sitztiefe	360 – 500 mm	360 – 500 mm
Sitzhöhe vorn	380 – 540 mm	380 – 540 mm
Sitzhöhe hinten	370 – 500 mm	370 – 500 mm
Rückenhöhe	250 – 500 mm	250 – 500 mm
Unterschenkellänge	280 – 510 mm	280 – 510 mm
Vorderrahmenwinkel	75° / 85°	75° / 85°
Max. Zuladung	120 kg	100 kg
Gewicht ab ca.	8,8 kg / 8,5 kg	7,4 kg
Transportgewicht (ohne Antriebsräder) ab ca.	6,3 kg / 6,0 kg	4,9 kg

Du bist an weiteren Infos oder an einer Fachberatung interessiert? Ein Rehatechniker deines Vertrauens unterstützt dich gern bei der Konfiguration deines Zenit R.

Material

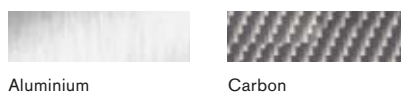

Aluminium

Carbon

RAL-Farben (Pulverbeschichtung)




Weiß RAL 9016

Tiefschwarz RAL 9005

Tiefschwarz RAL 9005 matt (Struktur)

Effektfarben (Pulverbeschichtung)

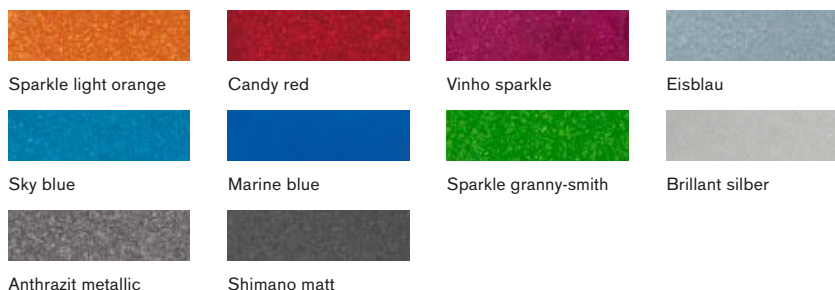

Anthrazit metallic

Shimano matt

Eloxalfarben*



Gold, matt eloxiert

Orange, matt eloxiert

Rot, matt eloxiert

Violett, matt eloxiert

Blau, matt eloxiert

Grün, matt eloxiert

Anthrazit, matt eloxiert

Schwarz, matt eloxiert

Das Style-Paket beinhaltet farbige Antriebsradfelgen und Vorderradadapter in Sparkle light orange, Candy red, Marine blue und Sparkle granny-smith.

* Nicht für Zenit R CLT-Version erhältlich.







Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach / Deutschland
www.ottobock.com